

產品使用說明卡


行動光溫敷儀 GoodLife 17

◇產品型號：LC2-R11-0B

◇產品用途：

利用物理性光能刺激與溫度提供身體局部溫敷，以達血液循環促進、按摩、紓解身體疲勞及平衡經絡氣血。 * [非醫療器材]

◇產品圖示及按鍵操作說明：

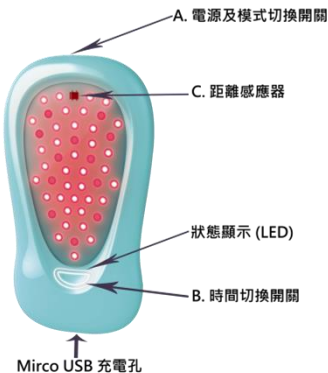

◇機台簡易操作說明：

- (1) 長按 A 鍵 < 3 > 秒開機(ON)
- (2) 狀態顯示 B 鍵處 LED 由藍轉白。
- (3) 短按 A 鍵 < 1 > 秒嗶一聲，進入模式(1)，開始溫敷。
- (4) 每 5 鐘有嗶一聲，15 分鐘後進入待機模式，60 秒沒有操作則自動關機。
- (5) 任何時候常按 A 鍵 < 3 > 秒關機 (OFF)

◇進階操作說明[A]鍵

- (1) 開機後，利用短按 A 鍵 < 1 > 秒，進入模式及待機的循環切換。

■ 模式選擇(1、2、3、4 循環)：

- (1) 強：嗶 1 聲- 症狀舒緩模式
- (2) 中：嗶 2 聲 - 溫敷按摩
- (3) 柔：嗶 3 聲 - 溫敷放鬆
- (4) 進入待機模式，60 秒自動關機。循環模式操作或長按 < 3 > 秒執行關機。

◇時間設定及狀態顯示[B]鍵：

- (1) 開機自動設定為 15 分鐘。
- (2) 請在待機模式，按壓 B 鍵進行 30 分鐘(嗶 2 聲)或 15 分鐘(嗶 1 聲)切換。

◇距離自動感應器說明[C]鍵：

機器靠近身體部位時[C]才會被感應，呈全功率狀態，避免紅光直接照射到眼睛。

◇溫敷部位說明：

(1) 症狀舒緩(部位)原則

如運動勞損或一般症狀舒緩時，將溫敷儀置於患部的肌肉關節處，藉以促進血液循環、放鬆肌肉、消除疲勞。

(2) 經絡溫敷原則

請徵詢專業人士指導進行，以達平衡氣血循環、養生保健之效。

◇光溫敷使用叮嚀：

- (1) 光照溫敷是利用特定波長生物光能來促進血液循環，是一種易於使用、非侵入式、無化學藥劑且無副作用的選擇。
- (2) 疼痛是一種症狀，而不是疾病的原因。光溫敷是利用溫熱光能來進行局部刺激，進而幫助身體的平衡及調節，加速身體的自癒能力。
- (3) 身體部位處於急性狀態紅、腫、熱、痛或有傷口時，請勿使用。
- (4) 請一次處理一個部位，遵守每次 15~30 分鐘原則，兩次之間間隔 3~4 小時。
- (5) 光能溫敷需要身體的接受與反應，同部位請勿連續超過 30 分鐘使用。
- (6) 注意照射部位的蓄溫情形，避免傷害。光溫敷後宜多補充溫開水。
- (7) 光溫敷運動或勞損之患部，請加上按摩伸展來加速疏解放鬆肌肉僵硬、痠痛的問題。
- (8) 溫敷部位 如：頸部、肩部、肘部、腕部、腰部、膝部、踝部、大小腿等，請利用提供的輔具、貼布或善用衣服、皮帶來進行固定。
- (9) 因個人體質不同，建議第一次使用前，先於手臂內側開啟模式 1 使用 15 分鐘以上，確認無光過敏及不適反應。

◇商品規格

項次	規 格	規 格 說 明
1	LED 顏色	紅光，近紅外線(不可見光)
2	供電方式	(1)Micro USB 充電使用 (2)可外接行動電源使用
3	產品尺寸	64.3mmX117.3mmX25.3mm
4	產品重量	88 g
5	產品配件	(1) Micro USB 訊號線 X1 (不含 USB 電源充電插頭)。 (2) 絨布袋 X1。 (3) 手足患處固定繃帶。 (4) 說明文件及保證卡。
6	按鍵模式 (兩鍵控制)	(1) [A]鍵 :電源(長按)/模式(短按)選擇。 (2) [B]鍵 :時間控制(15、30 分鐘)兩段式按鍵。
7	照射模式	連續光、脈衝(按摩)光

◇充電方式

- (1) 產品內含電池，請在第一次使用時，先將產品接到充電器上充電。本機採用標準 Micro USB 介面，使用一般手機充電插頭即可。
- (2) 本機電池採安全慢充方式，一次充滿電約需 5 小時。
- (3) 將連接線的另一端插入本產品上的 Micro USB 連接埠，模式選擇按鍵指示白燈開始閃爍同時蜂鳴會「嗶」一聲提示即表示開始充電。
- (4) 直到狀態顯示按鍵指示白燈恆亮時，表示產品電量已滿，約可持續供電 2 小時，依正常早中晚 15~30 分鐘使用，可供應 2~3 天使用。
- (5) 保持每晚進行充電或使用備用行動電源，確保後續電力及使用。

◇LED 顯示鍵的指示燈狀態

(1) 使用狀態下：

白燈亮：電池電量超過 70%。藍 + 白燈亮：電池電量低於 60%。

藍燈亮：電池電量低於 40%。

藍燈閃爍及蜂鳴提示：電池電量低於 10%。(請進行電池充電。)

* 此時可連接行動電源繼續使用。

(2) 充電狀態下：

白燈亮：充飽電。

白燈閃爍：電池正在充電中，電量低於 90%。

◇保養及保管方式

- (1) 清潔保養時，請用乾/軟布或專業醫療用品酒精棉片擦拭本產品表面髒污。
- (2) 本機沒有防水功能，請勿用水或有機溶劑擦拭沖洗或將本產品浸入水中。
- (3) 請勿將機台長時間日曬(如汽車內)或放置於濕度高(浴室內)的地方。

◇保固

本產品的保固期間是自產品購買日起一年，當要求保固服務時，客戶應提供購買的證明憑證，本保固不適用於本產品所附的周邊零件。

◇警告事項

- (1) 使用本產品前，請詳閱說明卡注意事項。
- (2) 嚴禁用於眼部的照射、保暖。
- (3) 凡是正在就醫治療者，請先諮詢醫生。
- (4) 如使用中感覺昏眩、噁心等身體不適或皮膚有異常反應時，請立即停止使用。

◇注意事項

- (1) 本產品啟動後，請勿眼睛靠近於機台發光面。
- (2) 請不要在淋浴或浴缸等潮濕環境使用本產品。
- (3) 使用本產品時，請遠離明火或高溫等環境以策安全。
- (4) 若本產品與充電器等配件損壞或泡水，則請勿使用。
- (5) 請勿將本產品與充電器等配件浸漬於水中或任何清潔劑內。
- (6) 請小心輕放，避免儀器從高處摔落。
- (7) 本產品為感應產品，感應功能可能受太陽光干擾，建議在室內操作使用。
- (8) 完全放電會減少電池的壽命，建議電池電量顯示不足訊號時，應立即充電。
- (9) 孕婦及配戴心律調整器或其他電子醫療設備者，請勿使用。
- (10) 請勿對產品主體進行拆卸，機台遭遇異常狀況請通知廠商處理。
- (11) 光照熱敷過程中，請注意照射部位是否感覺不適，皮膚有異常症狀或感覺太熱，請停止使用。
- (12) 對皮膚熱感覺較遲緩者(如糖尿病患者)，請徵詢醫師意見後再使用本產品。
- (13) 幼童及具身心功能障礙者，務必有人從旁協助操作，確認安全下才可使用。
- (14) 請勿使用於開放性傷口、急性發炎紅腫疼痛處。
- (15) 非本商品搭配的藥膏、貼布或保養品，請在光溫敷後再行使用，或諮詢專業醫事人員建議。
- (16) 冬天皮膚容易乾癢或是老年人皮膚乾燥搔癢，請徵詢醫事專業人士搭配合適藥膏或乳液使用。
- (17) 冬天當保暖包時，請隔著衣服貼身使用。請勿長時間接觸於皮膚上。
- (18) 女性月經期間，如經量大時請停止使用於腹部的部位溫敷。



◇廠商資訊

製造廠名稱：泰沂科技股份有限公司

製造廠地址：新竹市東區科學工業園區創新二路 1 號 1 樓

電話：+886-3-6687222

E-mail：info@tgilighting.com